


**Моё предназначение —
очистение!**

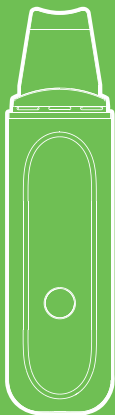

**Аппарат
для ультразвуковой
чистки лица
КТ-3132**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort	18

Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица КТ-3132 предназначен для удаления омертвевших клеток кожи, устранения жирного блеска и черных точек, способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу.

Ультразвуковая чистка воздействует на кожу 3 способами:

- механический — звуковые волны создают давление на ткани, массируют их, усиливая проводимость клеточных структур;
- термический — тепло звуковых колебаний разогревает кожу на 1–2 °С, поры расширяются, кожа становится мягкой и податливой, улучшается кровообращение;
- физико-химический — во время процедуры на лицо наносится лечебный или косметологический гель или сыворотка. Воздействие ультразвука способствует их проникновению в слои кожи, таким образом, обменные процессы в клетках протекают быстрее.

Устройство работает в 3 режимах:

- лифтинг;
- увлажнение;
- очищение.

Частота ультразвуковых колебаний в режиме «Очищение» — высокая, а в режимах «Лифтинг» и «Увлажнение» — средняя и низкая, соответственно. Похлопывающие движения лопатки в режимах «Лифтинг» и «Увлажнение» создают эффект микромассажа, который улучшает тон кожи, упругость и разглаживает морщины.

Использование аппарата для ультразвуковой чистки лица не уступает по эффективности профессиональным процедурам.

Комплексный подход позволяет максимально улучшить состояние кожи: очистить разные слои эпидермиса от загрязнений, а также нормализовать кровообращение и выровнять тон кожи.

Устройство имеет небольшие габариты: его удобно положить в сумку, взять с собой в путешествие.

Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица





Kitfort

Включить, выключить и выбрать режим работы аппарата для ультразвуковой чистки лица можно при помощи **кнопки «Вкл/Выкл»**:

- одно нажатие — работа в режиме «Очищение», индикатор режима будет гореть постоянно;
- два нажатия — работа в режиме «Увлажнение», индикатор режима будет мигать с низкой частотой;
- три нажатия — работа в режиме «Лифтинг», индикатор режима будет мигать с высокой частотой.

Для отключения устройства удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 3 секунд.

Режимы работы

Режим «Лифтинг» способствует:

- повышению тонуса и упругости кожи;
- уменьшению глубины морщин;
- улучшению тона кожи;
- уменьшению отечности.

Внимание! Перед использованием наносите на кожу лица питательный крем, гель или сыворотку, иначе вы можете травмировать кожу лопаткой.

Режим «Увлажнение» способствует:

- разравниванию уходовой косметики;
- улучшению тона кожи;
- укреплению мелких сосудов;
- повышению тонуса и упругости кожи;
- уменьшению отечности;
- уменьшению размеров пор.

Внимание! Перед использованием наносите на кожу лица питательный крем, гель или сыворотку, иначе вы можете травмировать кожу лопаткой.

Режим «Очищение» способствует:

- удалению загрязнений с поверхности кожи;
- устранению комедонов и загрязнений из пор;
- уменьшению размеров пор;
- улучшению тона кожи;
- выравниванию кожного рельефа.

Внимание! Перед использованием наносите на кожу очищающий гель, очищающее средство для умывания или сыворотку.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и шнур Micro-USB из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой влажной тканью. Тщательно продезинфицируйте лопатку: ее можно протереть ватным спонжем, смоченным в спирте или хлоргексидине. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Температура окружающего пространства должна находиться в диапазоне от 0 до 40 °С.

Зарядка аккумулятора

Если аккумулятор полностью разрядится, при включении устройства прозвучит 4 звуковых сигнала и индикаторы гореть не будут.

Подключите шнур Micro-USB к разъему на нижней части корпуса устройства, а затем к разъему компьютера или пауэрбанка.

Заряжайте устройство в течение 2 часов.

Во время зарядки индикаторы режимов плавно мигают. При полной зарядке индикаторы режимов будут гореть непрерывно.

Использование


1. Перед началом процедуры необходимо удалить загрязнения и макияж с кожи лица. При использовании аппарата для ультразвуковой чистки кожа лица должна быть увлажненной. Нанесите на кожу гель или сыворотку, чтобы лопатка лучше скользила и не повреждала кожу. Гель — это идеальный проводник для ультразвуковых волн.
2. Снимите крышку с устройства.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство заработает. При включении устройства раздастся один звуковой сигнал. Устройство включится в режиме «Очищение». Нажатие на кнопку при переключении режимов сопровождается одиночным звуковым сигналом. Выберите необходимый режим работы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»:
 - один раз — режим «Увлажнение»;
 - два раза — режим «Лифтинг».

4. Чтобы выключить устройство, необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. При выключении прозвучит двойной звуковой сигнал.

Примечание. Аппарат ультразвуковой чистки лица не обладает встроенной памятью. При повторном включении устройство начнет работать в режиме «Очищение» независимо от того, в каком режиме вы работали ранее.

Режим «Очищение»


1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу очищающий гель, сыворотку или просто смочите водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 2 раза. Генерация ультразвука постоянная.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внутренней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 5 минут. Затем умойте лицо теплой водой.

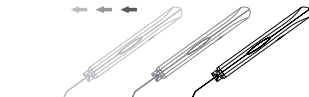

Режим «Увлажнение»


1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу очищающий гель, сыворотку или просто смочите водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 2 раза. Генерация ультразвука прерывистая.

4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки по направлению движения. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в уходе, в течение 5 минут. Затем умойте лицо теплой водой.

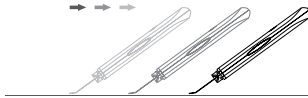

Режим «Лифтинг»

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу очищающий гель, сыворотку или просто смочите водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 3 раза. Частота ультразвуковых колебаний — средняя.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки по направлению движения. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в уходе, в течение 5 минут. После процедуры умойте лицо теплой водой.

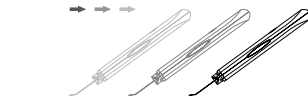

Советы

У устройства срабатывает автоотключение через 5 минут работы. При этом звучит тройной звуковой сигнал.

Держите устройство только сухими руками во избежание попадания влаги на кнопку «Вкл/Вкл», в корпус устройства, разъем шнура Micro-USB. Вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя.



Kitfort

Во время использования не задерживайтесь на одном участке лица, вы должны медленно продвигать лопатку по коже в направлении, как показано на рисунке.



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, прорабатывая устройством обе стороны лица по горизонтали



Для очищения зоны вокруг носа используйте искривленный угол лопатки



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, действуя прибором вертикально. Такое направление движений стимулирует естественный лимфатический дренаж организма



Используйте вырезанную среднюю часть лопатки, чтобы очистить область подбородка под нижней губой вертикальными короткими движениями

Если у вас на лице есть воспаление, нужно подождать пока воспаление не исчезнет и только потом пользоваться устройством.

Рекомендуется пользоваться устройством 2–3 раза в неделю. Не пользуйтесь устройством повторно в течение одного дня.

Перед использованием убедитесь, что лопатка и корпус устройства чистые.

Запрещается пользоваться устройством при следующих показаниях:

- онкологические заболевания кожи;
- имплантированный кардиостимулятор;
- нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
- нарушения свертываемости крови;
- нарушения кожной чувствительности;
- наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- эпилепсия;
- тромбофлебит;
- беременность;
- выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
- индивидуальная непереносимость электрического тока.

Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:

- глаза;
- область над сердцем и щитовидной железой;
- половые органы;
- над силиконовыми имплантатами;
- области с гелевой контурной пластикой.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Очищайте лопатку перед и после каждого использования: продезинфицируйте лопатку спонжем, смоченным в спирте или хлоргексидине. Не используйте для чистки лопатки жесткие моющие средства и абразивные ткани.

Уход и хранение

Храните аппарат для ультразвуковой чистки лица в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Аккумулятор аппарата для ультразвуковой чистки полимерный литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство в течение 1 часа. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 2–3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды или других жидкостей в порт зарядки устройства.

Устранение неполадок

Аппарат для ультразвуковой чистки не включается, дисплей не загорается, нет ультразвуковой вибрации

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство в течение 2 часов

Аппарат для ультразвуковой чистки не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур Micro-USB	Обратитесь к производителю за новым шнуром Micro-USB или приобретите такой же шнур
Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем компьютера или пауэрбанка	Проверьте соединение шнура Micro-USB с разъемом компьютера или пауэрбанка

Аппарат для ультразвуковой чистки перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 5 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»

Нет ультразвуковой вибрации

Возможная причина	Решение
Вы слишком сильно давили на лопатку во время использования	Устройство вышло из строя. Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности

Лопатка нагревается во время использования

Возможная причина	Решение
Лопатка слегка нагревается из-за воздействия ультразвуковых колебаний	Это нормально и не является неисправностью

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы не смазали кожу гелем или сывороткой	До процедуры или во время процедуры смазывайте кожу гелем или сывороткой, чтобы не травмировать верхние слои кожи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB \approx 5 В, 0,32 А
2. Мощность: 1,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Pol 3,7 В, 0,3 А*ч (1,11 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 24000 Гц
6. Уровень шума: \leq 50 дБ
7. Время зарядки: 2 ч
8. Время работы от аккумулятора: около 50 мин
9. Количество режимов работы: 3
10. Автоотключение: через 5 мин
11. Длина шнура Micro-USB: 0,5 м
12. Размер устройства: 42 × 15 × 173 мм
13. Размер упаковки: 82 × 47 × 200 мм
14. Вес нетто: 0,09 кг
15. Вес брутто: 0,27 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко.,
Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия
Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на
территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с
9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора
горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения
вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект
от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным
способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне
упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура Micro-USB и шнур Micro-USB не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Запрещается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица при следующих показаниях:
 - онкологические заболевания кожи;
 - имплантированный кардиостимулятор;
 - нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
 - нарушения свертываемости крови;
 - нарушения кожной чувствительности;
 - наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
 - эпилепсия;
 - тромбофлебит;
 - беременность;



- выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
 - индивидуальная непереносимость электрического тока.
4. Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:
 - глаза;
 - область над сердцем и щитовидной железой;
 - половые органы;
 - над силиконовыми имплантатами;
 - области с гелевой контурной пластикой.
 5. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
 6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 7. Не заряжайте устройство, если шнур Micro-USB поврежден. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
 8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 9. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 10. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 11. Держите прибор только сухими руками.
 12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура Micro-USB, на шнур Micro-USB и на кнопку «Вкл/Выкл».
17. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-2



Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87