

**Держи  
ноги  
в тепле!**



**Грелка-  
массажер  
КТ-2923**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство грелки-массажера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort .....	14

## Общие сведения

Грелка-массажер от Kitfort КТ-2923 поможет согреть ноги, а также сделать массаж, не прибегая к посторонней помощи. Обе функции можно использовать одновременно или отдельно друг от друга.

Грелка сделана в форме сапожка и подойдет для ступней любого размера. Внутри грелки-массажера есть съемная подкладка из приятного флиса. Управление грелкой-массажером осуществляется с помощью пульта. Вам нужно подключить устройство к сети, на пульте управления выбрать уровень нагрева и скорость массажа. Всего две скорости массажа и два уровня нагрева.


Грелка-массажер КТ-2923 подарит тепло и уют, поможет снять напряжение, активизировать кровообращение, улучшить течение обменных процессов, суставных болях, а проработка активных точек на стопах благотворно влияет на весь организм. Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-то заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

## Комплектация

1. Грелка-массажер — 1 шт.
2. Съемная подкладка — 1 шт.
3. Пульт управления — 1 шт.
4. Сетевой адаптер — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*


\*опционально

## Устройство грелки-массажера

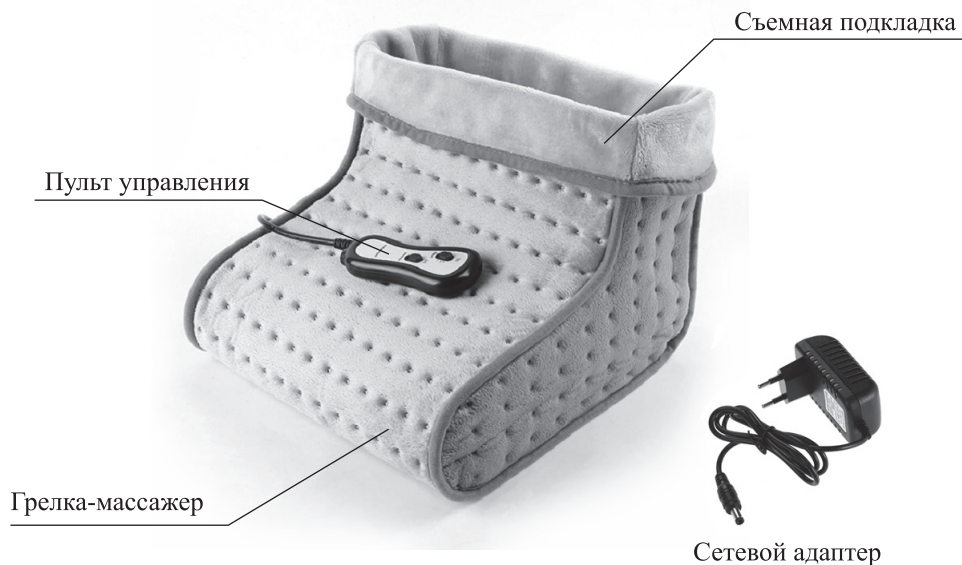

Поступающая электроэнергия от сети преобразуется в постоянный ток, который равномерно нагревает провода, зашитые внутри грелки. Вы можете настроить уровень нагрева и скорость массажа.

### Пульт управления

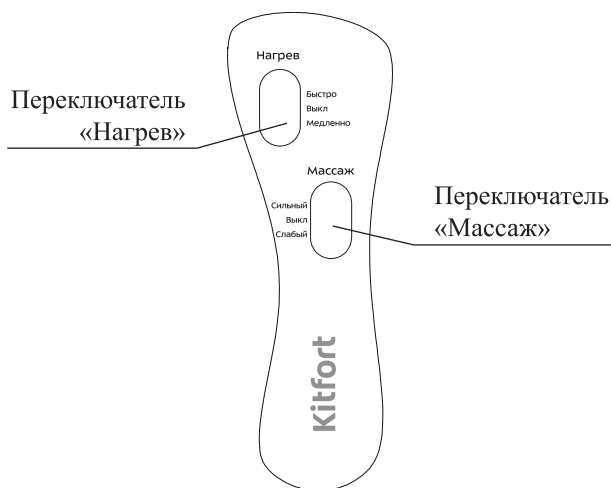

С помощью переключателя «Нагрев» можно включить нагрев грелки-массажера. Если передвинуть переключатель «Нагрев» в положение «Быстро», то грелка нагреется до температуры примерно  $55 \pm 5^\circ\text{C}$  быстрее, чем если установить переключатель в положение «Медленно».

Чтобы выключить функцию нагрева передвиньте переключатель в положение «Выкл».

С помощью переключателя «Массаж» можно выбрать интенсивность — сильную или слабую. Чтобы выключить функцию массажа передвиньте переключатель в положение «Выкл».

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте грелку-массажер. Перед использованием проверьте изделие на наличие возможных повреждений, например если есть повреждения шнура сетевого адаптера, пульта управления, то ей пользоваться нельзя. При обнаружении повреждений грелку необходимо вернуть в магазин.

Перед тем как включить, расправьте грелку-массажер. В скрученном или сложенном состоянии включать устройство запрещено. Не зажимайте и не перегибайте ее.

Данное изделие предназначено для обогрева и массажа ног. Не пользуйтесь грелкой-массажером в обуви, т. к. из-за этого падает чувствительность к теплу, а сама грелка получает загрязнения.

Во избежание несчастных случаев протяните шнур питания таким образом, чтобы никто не мог споткнуться и случайно выдернуть его. Убедитесь, что шнур не контактирует с острыми и горячими предметами. Убедитесь, что во время использования пульт управления не накрыт и не лежит на горячей поверхности.

Если у вас грязные ноги, то помойте их, чтобы сохранить в чистоте съемную подкладку.

### Использование

1. Убедитесь в том, что грелка-массажер лежит ровно и не сминается. Смятые участки сильно нагреваются, что может быть опасно для здоровья.
2. Подсоедините грелку-массажер к источнику питания. Для этого провод пульта управления вставьте в разъем сетевого адаптера, а сетевой адаптер в розетку.  
**Внимание!** Не оставляйте работающую грелку-массажер без присмотра!
3. На пульте переключателем «Нагрев» установите нагрев. Если передвинуть переключатель «Нагрев» в положение «Быстро», то грелка нагреется до температуры примерно  $55 \pm 5^\circ\text{C}$  быстрее, чем если установить переключатель в положение «Медленно». Чтобы выключить функцию нагрева передвиньте переключатель в положение «Выкл».

**Внимание!** Вы можете заметить слабый запах при первом включении. Это нормально и не является неисправностью. Обязательно проветрите комнату после того, как грелка была нагрета в первый раз.

4. Вставьте ноги в отверстия грелки-массажера.
5. Установите переключателем комфортную для вас интенсивность массажа — слабую или сильную. Чтобы выключить функцию массажа передвиньте переключатель в положение «Выкл».
6. Функции нагрева и массажа можно использовать одновременно или отдельно друг от друга.  
Не превышайте максимальное время непрерывной работы грелки-массажера 45 минут. После 45 минут работы грелке следует дать остыть в течение 10 минут.

### **Меры предосторожности по применению**

1. Данное устройство не является медицинским прибором, если у вас есть какие-то заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
  - инфекционные заболевания кожи;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
  - повышенная температура;
  - сахарный диабет.
3. Пользоваться с осторожностью при:
  - наличии открытых ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
  - нечувствительности к теплу;
  - переутомлении.
4. Грелкой-массажером нельзя пользоваться:
  - во время сна или в душе;
  - детям, младше 12 лет;
  - беременным женщинам;
  - людям, у которых есть проблемы со здоровьем (постоянные недомогания и боли могут указывать на более серьезные заболевания).

### **Советы**

1. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не давите сильно ногами на вибрирующую часть грелки. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.
2. Не использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла. Не использовать детям от 0 до 3 лет. Не использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и детям от 3 до 8 лет без присмотра. Не использовать для обогрева животных: существует опасность

прокусывания изоляции, которое может привести к травме от поражения электрическим током и возможной последующей гибели животного.

3. Не превышайте максимальное время непрерывной работы грелки-массажера 45 минут. После 45 минут работы грелке следует дать остыть в течение 10 минут.

## Чистка и обслуживание

Необходимо поддерживать чистоту изделия, т. к. стирка грелки-массажера запрещена.

Не используйте растворители или агрессивные моющие средства. Допускается чистить грелку-массажер влажной тканью или губкой, не скручивайте и не мните изделие при этом. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен. Удаляйте ворсинки с использованием валика для шерсти.

Допускается стирать съемную подкладку вручную при температуре не выше 30 °С. Также съемную подкладку можно стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре не выше 30 °С. После стирки дайте подкладке высохнуть естественным путем.

Не используйте грелку, если она влажная или мокрая.


Не сушите с помощью сушильной машины для белья. Не сушите грелку на солнце. Не используйте для сушки фен.


 Не отбеливать.


 Не гладить.

 Не подвергать химчистке.

 Не сушить в сушильной машине.

 Не вставлять острые предметы.

 Не использовать в сложенном виде.

 Машинная деликатная стирка, 30 °С (только съемную подкладку).

 Не использовать маленьким детям (0–3 года).



## Уход и хранение

Перед хранением дайте грелке-массажеру остыть. В противном случае изделие повредится или испортится. Аккуратно сложите грелку-массажер без образования каких-либо складок и не кладите любые тяжелые предметы на нее во время хранения. Не перегибайте шнур питания и шнур от пульта управления, не обматывайте их вокруг изделия.

Не используйте средства от моли.

Храните грелку-массажер в безопасном, прохладном и сухом месте, недоступном для детей.

Не ставьте и не храните изделие там, где оно может упасть в воду или другую жидкость.

## Устранение неполадок

### Грелка-массажер не работает

Возможная причина	Решение
Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
Вы не включили переключатели «Нагрев» или «Массаж на пульте управления»	На пульте переключателем «Нагрев» установите нагрев. Если передвинуть переключатель «Нагрев» в положение «Быстро», то грелка нагреется до температуры примерно $55 \pm 5^\circ\text{C}$ быстрее, чем если установить переключатель в положение «Медленно». Установите переключателем «Массаж» комфортную для вас интенсивность массажа — слабую или сильную

### Грелка-массажер нагрелась

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Не превышайте максимальное время непрерывной работы грелки-массажера 45 минут. После 45 минут работы грелке следует дать остыть в течение 10 минут



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц 0,5 А
  - выход: =12 В, 1,5 А
2. Мощность: 18 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - Блока питания: II
  - Грелки-массажера: III
4. Материал подкладки: полиэстер
5. Размер пульта: 115 × 55 мм
6. Длина шнура пульта: 0,7 м
7. Длина шнура блока питания: 2,3 м
8. Размер устройства: 300 × 300 × 220 мм
9. Размер упаковки: 325 × 125 × 280 мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Дунгуань Санбрайт Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №102, Шандун Ихэн Ист Роуд, Циши Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс 523455, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение грелки-массажера, ее аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа грелки-массажера или ее несоответствующего использования.

Выход из строя грелки-массажера вследствие попадания жидкостей в грелку, пульт управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте грелку-массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование грелки-массажера будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением грелки-массажера к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на ней, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте саму грелку, шнур питания и пульт управления в воду и другие жидкости.
5. Грелка-массажер не предназначена для общественного использования, применения в медицинских учреждениях.
6. Люди с кардиостимуляторами должны проконсультироваться со своими врачами или производителем кардиостимулятора перед использованием грелки-массажера, так как электронное и магнитное излучение может повлиять на функцию кардиостимулятора при определенных обстоятельствах.
7. Нельзя использовать грелку-массажер людям, нечувствительным к воздействию тепла.

8. Не использовать грелку-массажер для детей от 0 до 3 лет.
9. Не использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и детям от 3 до 8 лет без присмотра.
10. Не использовать для обогрева животных. Существует опасность прокусывания изоляции, которое может привести к травме от поражения электрическим током и возможной последующей гибели животного.
11. Во избежание перегрева во время использования никогда не накрывайте пульт управления и не кладите его на грелку-массажер. Пульт управления должен находиться на открытом месте. Не накрывайте ее какими-либо предметами, например одеялом или подушкой.
12. Грелку-массажер нельзя использовать в сложенном или смятом виде. Это может привести к соприкосновению проводов, что вызовет возгорание!
13. Когда грелка-массажер выключена или включена, ее нельзя сжимать, мять, чтобы не деформировать провода.
14. Не дергайте, не скручивайте и не перегибайте шнур питания.
15. Не прокалывайте грелку-массажер булавками или другими металлическими предметами.
16. Не используйте грелку-массажер вместе с другими нагревательными приборами или водяными грелками.
17. Не допускайте образования складок на изделии.
18. Выключайте грелку-массажер, если не используете ее.
19. Избегайте давления на пульт управления.
20. Во избежание повреждений при отключении от сети потяните за штепсель, никогда не тяните за шнур!
21. Никогда не используйте влажную грелку-массажер!
22. Штепсель, шнур, пульт управления не должны контактировать с водой или любыми другими жидкостями.
23. Не использовать людям, склонным к недержанию мочи.
24. Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми руками или стоя на влажной поверхности.
25. Не используйте грелку-массажер, если шнур питания, вилка или другие части изделия повреждены. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь ремонтировать грелку-массажер самостоятельно — для ее ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
26. Не позволяйте детям играть с грелкой-массажером.
27. Не используйте грелку-массажер во время грозы, т.к. существует риск поражения электрическим током.
28. Не оставляйте работающую грелку-массажер без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете ее длительное время или перед проведением обслуживания.

29. Храните грелку-массажер в недоступных детям местах.
30. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке изделия или получению травм.
31. Не использовать грелку-массажер во влажном состоянии.
32. Не кладите на грелку-массажер разные предметы.
33. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-3

## Другие товары Kitfort



### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт



### Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87