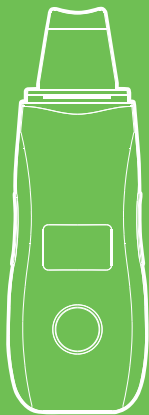


**Ультразвук  
для тебя и  
подруг!**



**Аппарат  
для ультразвуковой  
чистки лица  
КТ-3113**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица .....	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание .....	13
Уход и хранение .....	13
Устранение неполадок .....	13
Технические характеристики .....	15
Меры предосторожности.....	16
Другие товары Kitfort .....	18

## Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица КТ-3113 предназначен для удаления омертвевших клеток кожи, устранения жирного блеска и черных точек, способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу.

Ультразвуковая чистка воздействует на кожу 3 способами:

- механический — звуковые волны создают давление на ткани, массируют их, усиливая проводимость клеточных структур;
- термический — тепло звуковых колебаний разогревает кожу на 1–2 °С, поры расширяются, кожа становится мягкой и податливой, улучшается кровообращение;
- физико-химический — во время процедуры на лицо наносится лечебный или косметологический гель. Воздействие ультразвука способствует их проникновению в слои кожи, таким образом, обменные процессы в клетках протекают быстрее.

Устройство имеет 5 режимов работы:

- ультразвуковая чистка;
- ионофорез (ION+);
- ионофорез (ION–);
- микротоковый массаж;
- гальванический лифтинг.

Использование аппарата для ультразвуковой чистки лица не уступает по эффективности профессиональным процедурам.

Комплексный подход позволяет максимально улучшить состояние кожи: очистить разные слои эпидермиса от загрязнений, а также нормализовать кровообращение и выровнять тон кожи.

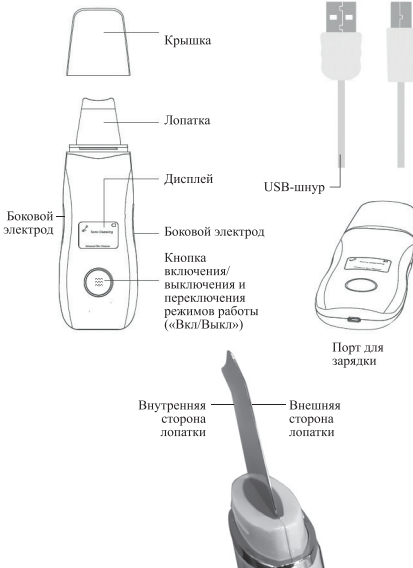
Устройство имеет небольшие габариты: его удобно положить в сумку, взять с собой в путешествие.

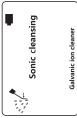
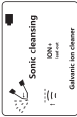
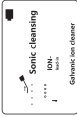

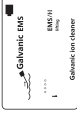
## Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. USB-шнур — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица



Количество нажатий на кнопку «Вкл/Выкл»	Одно	Режим ультразвуковой чистки	Два	Три	Четыре	Пять
Режим	Режим ультразвуковой чистки	Режим ионофореза (ION+)	Режим ионофореза (ION-)	Режим микро-массаж	Режим гальванического лифтинга	
Изображение на дисплее						
Функции	Ультразвуковая чистка	Глубокая ультразвуковая чистка + воздействие положительными ионами	Ультразвуковая чистка + воздействие отрицательными ионами + питание внутренних слоев кожи	Массаж + разглаживание уходовой косметики	Массаж + разглаживание уходовой косметики + разглаживание мелких морщин	

**Режим ультразвуковой чистки** лица способствует очищению от черных точек, сальных пробок, удаляет мертвые клетки верхнего слоя кожи.

**Ионофорез** — физический процесс миграции заряженных ионов под действием постоянного тока малой величины.

**Внимание!** Перед использованием данного режима смочите кожу лица водой или увлажните гелем или сывороткой

**В режиме ионофореза (ION+)** положительно заряженные ионы способствуют:

- удалению загрязнений из глубоких слоев кожи, таких как комедоны (комедоны — пробки из смеси кожного сала и отшелушенного эпителия, которые закупоривают поры);
- закрытию пор;
- разрыхлению и смягчению кожи;
- раскрытию кровеносных сосудов и усилению микроциркуляции крови;
- разрыхлению сальных пробок;
- усилению деятельности сальных и потовых желез.

**Внимание!** Перед использованием данного режима наносите на кожу лица очищающие средства для умывания.

**Режим ионофореза (ION-)** способствует удалению мертвых клеток верхнего слоя кожи, глубокому увлажнению и питанию внутренних слоев кожи, благодаря воздействию отрицательно заряженных ионов. Воздействие отрицательных ионов способствует:

- раскрытию пор;
- сужению кровеносных сосудов;
- уплотнению кожи;
- снятию отеков;
- снижению деятельности сальных и потовых желез.

**Внимание!** Перед использованием данного режима наносите на кожу очищающий гель или сыворотку.

**Режим микротокового массажа** повышает тонус мимических мышц лица, восстанавливает корректную работу сальных желез, устраняет отечность и способствует выравниванию тона лица. Похлопывающие движения лопатки помогают уходовой косметике лучше проникать в глубокие слои кожи.

**Внимание!** Перед использованием данного режима наносите на кожу лица питательный крем, гель или сыворотку, иначе можно травмировать кожу лопаткой.

**Режим гальванического лифтинга** способствует разглаживанию мелких морщин благодаря микротоковым импульсам и воздействию отрицательно заряженных ионов.

**Внимание!** Перед использованием наносите на кожу лица питательный крем, гель или сыворотку, иначе можно травмировать кожу лопаткой.



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой влажной тканью. Тщательно продезинфицируйте лопаточку: ее можно протереть ватным спонжем, смоченным в спирте или хлоргексидине. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

### Зарядка аккумулятора

Заряжайте устройство в течение 2–2,5 часов.

Во время зарядки на дисплее устройства будет отображаться значок заряжающейся батареи. При полной зарядке значок батареи будет полным.

### Использование

1. Перед началом процедуры необходимо удалить загрязнения и макияж с кожи лица. При использовании аппарата для ультразвуковой чистки кожа лица должна быть увлажненной. Нанесите на кожу гель или сыворотку, чтобы лопатка лучше скользила и не повреждала кожу. Гель — это идеальный проводник для ультразвуковых волн.
2. Снимите защитный колпачок с устройства.
3. Возьмите устройство в руку, зажав боковые электроды, чтобы обеспечить оптимальное подведение ионов. При включении раздастся один звуковой сигнал.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство заработает. При включении устройство автоматически включится в режиме ультразвуковой чистки. Нажатие на кнопку при переключении режимов сопровождается одиночным звуковым сигналом. Выберите необходимый режим работы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»:
  - один раз — режим ультразвуковой чистки;
  - два раза — режим ионофореза (ION+);
  - три раза — режим ионофореза (ION-);
  - четыре раза — режим микротокавого массажа;
  - пять раз — режим гальванического лифтинга.

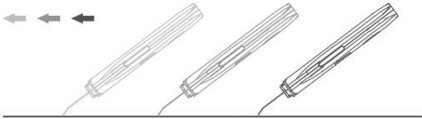
Чтобы выключить устройство, необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. При выключении прозвучит двойной звуковой сигнал.



**Примечание.** Аппарат ультразвуковой чистки лица не обладает встроенной памятью. При повторном включении устройство начнет работать в режиме ультразвуковой чистки независимо от того, в каком режиме вы работали ранее.


*Режим ультразвуковой чистки*

- Смочите кожу лица водой или увлажните гелем или сывороткой.
- Включите устройство. Запустится режим ультразвуковой чистки лица. Частота ультразвука постоянна.
- Прислоните устройство под углом 30–45° к коже лица внутренней стороной лопатки по направлению движения. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 3 минут. После процедуры умойте лицо теплой водой.



*Режим ионофореза (ION+)*

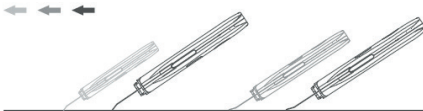- Нанесите на кожу очищающий гель или сыворотку и оставьте на 5 минут.
- Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» два раза. В данном режиме частота ультразвука постоянна.
- Прислоните устройство под углом 30–45° к коже лица сначала внутренней, а затем внешней стороной лопатки по направлению движения. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 3 минут, меняя сторону лопатки. Затем умойте лицо теплой водой.





**Kitfort**

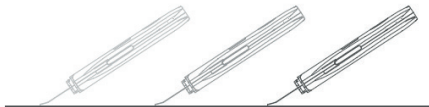
*Режим ионофореза (ION-)*

- Нанесите на кожу очищающий гель или сыворотку.
- Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» три раза. В данном режиме частота ультразвука постоянна.
- Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 3 минут, меняя сторону лопатки. Затем умойте лицо теплой водой.




*Режим микротокового массажа*

- Нанесите на кожу очищающий крем, гель или сыворотку.
- Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» четыре раза. Частота ультразвука в данном режиме периодична.
- Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 3 минут, меняя сторону лопатки. Затем умойте лицо теплой водой.



*Режим гальванического лифтинга*

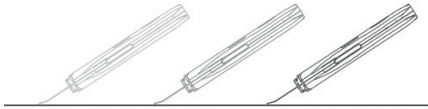- Нанесите на кожу очищающий гель или сыворотку.
- Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» пять раз. Частота ультразвука в данном режиме периодична.
- Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 3 минут, меняя сторону лопатки. Затем умойте лицо теплой водой.



4. После завершения процедуры выключите устройство, зажав кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

**Советы**

Держите устройство только сухими руками во избежание попадания влаги на кнопку «Вкл/Выкл». Вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя.

Во время использования не задерживайтесь на одном участке лица, вы должны медленно продвигать лопатку по коже в направлении, как показано на рисунке.



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, прорабатывая устройством обе стороны лица по горизонтали



Для очищения зоны вокруг носа используйте искривленный угол лопатки



**Kitfort**



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, действуя прибором вертикально. Такое направление движений стимулирует естественный лимфатический дренаж организма



Используйте вырезанную среднюю часть лопатки, чтобы очистить область подбородка под нижней губой вертикальными короткими движениями

Если у вас на лице есть воспаление, нужно подождать пока воспаление не исчезнет и только потом пользоваться устройством.

Рекомендуется пользоваться устройством 2–3 раза в неделю. Не пользуйтесь устройством повторно в течение одного дня.

Перед использованием убедитесь, что лопатка и корпус устройства чистые.

**Запрещается пользоваться устройством при следующих показаниях:**

- онкологические заболевания кожи;
- имплантированный кардиостимулятор;
- нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
- нарушения свертываемости крови;
- нарушения кожной чувствительности;
- наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- эпилепсия;
- тромбоз;
- беременность;
- выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
- индивидуальная непереносимость электрического тока.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Очищайте лопатку перед и после каждого использования: продезинфицируйте лопатку спонжем, смоченным в спирте или хлоргексидине. Не используйте для чистки лопатки жесткие моющие средства и абразивные ткани.

## Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Аккумулятор аппарата для ультразвуковой чистки литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство в течение 1–1,5 часов. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 5–7 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды или других жидкостей в порт зарядки устройства.

## Устранение неполадок

**Аппарат для ультразвуковой чистки не включается, дисплей не загорается, нет ультразвуковой вибрации**

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство

**Аппарат для ультразвуковой чистки не заряжается**

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден USB-шнур	Приобретите новый USB-шнур у производителя

### Нет ультразвуковой вибрации

Возможная причина	Решение
Вы слишком сильно давили на лопатку во время использования	Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности

### Лопатка нагревается во время использования

Возможная причина	Решение
Лопатка слегка нагревается из-за воздействия ультразвуковых колебаний	Это нормально и не является неисправностью

### Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы не смазали кожу гелем или сывороткой	До процедуры или во время процедуры смазывайте кожу гелем или сывороткой, чтобы не травмировать верхние слои кожи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB=5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1 А\*ч (3,7 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 24000–26000 Гц
6. Уровень шума: ≤90 дБ
7. Время зарядки: 2–2,5 часа
8. Время работы от аккумулятора: около 40 минут
9. Количество режимов работы: 5
10. Длина USB-шнура: 0,4 м
11. Размер устройства: 56 × 20 × 177 мм
12. Размер упаковки: 80 × 45 × 200 мм
13. Вес нетто: 0,12 кг
14. Вес брутто: 0,30 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко.,  
Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Бай-  
шия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-  
Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.  
Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий  
на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-  
Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с  
9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора  
горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения  
вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект  
от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным  
способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне  
упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в  
дизайн, комплектацию, а также в технические характери-  
стики изделия в ходе совершенствования своей продукции  
без дополнительного уведомления об этих изменениях.



**Kitfort**

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Запрещается пользоваться устройством для ультразвуковой чистки лица при следующих показаниях:
  - онкологические заболевания кожи;
  - имплантированный кардиостимулятор;
  - нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
  - нарушения свертываемости крови;
  - нарушения кожной чувствительности;
  - наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекетсы);
  - эпилепсия;
  - тромбофлебит;
  - беременность;
  - выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
  - индивидуальная непереносимость электрического тока.
4. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.



5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части аппарата для ультразвуковой чистки лица повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Держите прибор только сухими руками.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема USB-шнура и на кнопку «Вкл/Выкл».
16. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87