


**С заботой  
о твоём теле!**

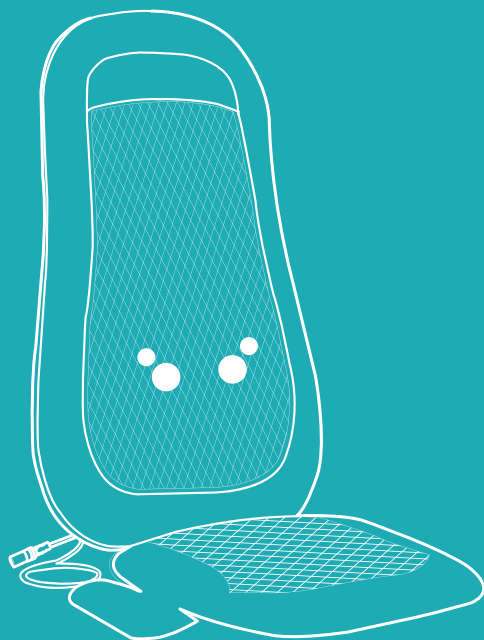

**Массажер  
КТ-2933**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Массажер КТ-2933 поможет избавиться от дискомфорта в спине, оказывая воздействие массажными роликами на мышцы вдоль позвоночника. Массаж спины поможет снять усталость, напряженность и расслабить мышцы как людям, ведущим сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает физические нагрузки, например, спортсменам после тренировки. Массаж помогает справиться с болью в спине людям, страдающим болезнями позвоночника (сколиоз, грыжа, остеохондроз и т.п.).

Давление на мышцы спины во время массажа усиливает циркуляцию крови, в результате чего ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Сеансы массажа положительно влияют на состояние костно-мышечной системы. Они повышают эластичность мышечных волокон.

Массаж спины помогает восстановить нормальную работу лимфотока, что оказывает общее детоксикационное действие, улучшая доступ питательных веществ к межпозвоночным дискам.

Массажер имеет три зоны массажа: вся спина, плечевой пояс, поясница. Для повышения эффективности массажа у КТ-2933 есть функции вибрации и инфракрасного прогрева. Управление массажером осуществляется с пульта управления, который можно убрать в карман для хранения на массажере. В данной модели массажера есть удобное крепление к стулу в виде резинок для фиксации массажера во время работы.

После 15-минутного сеанса массажа сработает автоотключение.


Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-то заболевания или противопоказания к проведению массажа спины, то перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

## Комплектация


1. Массажер с пультом управления и коннектором для подключения блока питания — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера

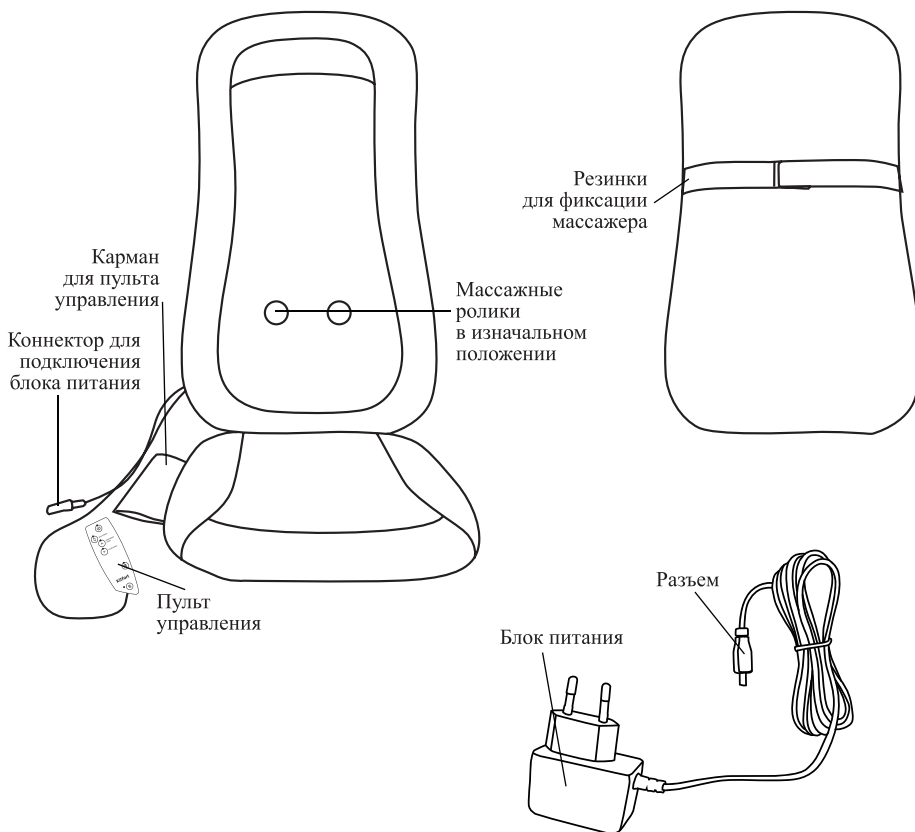

## Пульт управления

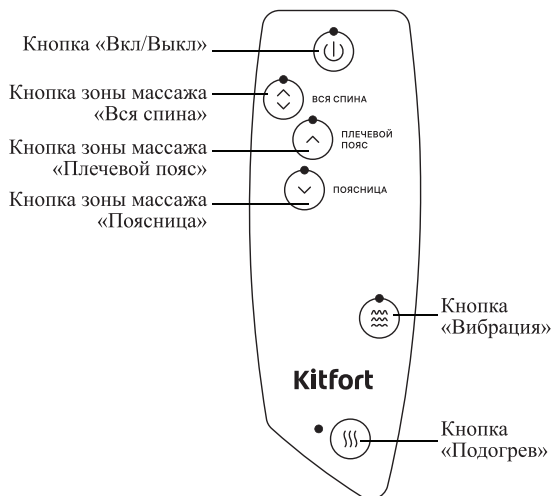

Управление массажером осуществляется пультом управления.

Массажер включается нажатием на кнопку **«Вкл/Выкл»**, над кнопкой загорается индикатор, массажные ролики начинают работу. По умолчанию выбран массаж всей спины. Вы можете изменить зону массажа кнопками **«Плечевой пояс»**, **«Поясница»** или вернуться к массажу всей спины, нажав кнопку **«Вся спина»**. На пульте управления над кнопкой выбранной зоны будет гореть индикатор.

Для включения/выключения функций вибрации и подогрева нажмите на кнопку **«Вибрация»** и **«Подогрев»**. При нажатии на кнопку над ней загорится индикатор — функция включена. При повторном нажатии на кнопку, индикатор погаснет — функция выключена.

Через 15 минут массажа срабатывает автоотключение. Если вы хотите прервать сеанс массажа нажмите на кнопку **«Вкл/Выкл»**. Индикатор над кнопкой начнет мигать, ролики вернуться в изначальное положение, после чего индикатор погаснет — массажер выключен.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал.

Поместите массажер на стул. Зафиксируйте резинками.

Вставьте коннектор для подключения блока питания в разъем блока питания, а сам блок питания подключите к сети. Массажные ролики начнут двигаться, индикатор над кнопкой «Вкл/Выкл» будет мигать. Дождитесь, когда индикатор погаснет и ролики перестанут двигаться.

### Использование

1. Сядьте на стул ровно. Расслабьтесь, не давите на массажер. Проводите сеанс массажа в одежде без каких-либо декоративных элементов (ремней, пуговиц, молний и т. п.). Наличие аксессуаров на одежде может нанести вам ушибы во время массажа.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», индикатор над кнопкой загорится красным — по умолчанию начнется массаж всей спины.
3. Вы можете менять зону массажа кнопками «Плечевой пояс», «Поясница», «Вся спина».
4. Вы можете включить вибрацию или подогрев во время массажа с помощью кнопок «Вибрация» и «Подогрев».
5. Через 15 мин сработает автоотключение. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При завершении работы над кнопкой «Вкл/Выкл» будет мигать индикатор, ролики вернуться в изначальное положение, после чего индикатор погаснет — массажер выключен.
6. После автоотключения вы можете нажать на кнопку «Вкл/Выкл» для включения массажера, если хотите продолжить использование.

**Примечание.** Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 15 минут. При увеличении времени сеанса массажа могут возникнуть повреждения кожи и мышечной ткани.

7. После завершения работы массажера, отключите его от сети питания. Не отключайте массажер от сети питания, пока массажные ролики не вернулись в исходное положение и индикатор включения не перестал гореть.

### Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
  - злокачественные новообразования;
  - повреждения целостности кожи в зоне массажа;
  - инфекционные заболевания кожи;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
  - повышенная температура;



- сахарный диабет;
  - дети младше 12 лет.
4. Пользоваться с осторожностью при:
- беременности;
  - наличии ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
  - нечувствительности к теплу;
  - переутомлении.

## Чистка и обслуживание

Необходимо поддерживать чистоту изделия, т. к. стирка массажера запрещена. Перед чисткой убедитесь, что массажер отключен от сети электропитания. Допускается протирать массажер влажной тканью. Не используйте растворители или агрессивные моющие средства. Не используйте массажер, если он влажный. Не сушите массажер на солнце. Не используйте для сушки фен.

## Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, очистите как указано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте в пакет или коробку для защиты от пыли.

Не кладите тяжелые предметы на устройство во время хранения. Не перегибайте шнур питания и шнур от пульта управления, не обматывайте их вокруг изделия.

## Устранение неполадок

### Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Коннектор для подключения блока питания вставлен не до конца/не вставлен в разъем блока питания	Вставьте коннектор для подключения блока питания в разъем блока питания
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления



### Массажные ролики вращаются медленно

Возможная причина	Решение
Слишком большая нагрузка на массажные ролики	Уменьшите нагрузку на массажер. Не давите на него

### Массажные ролики вращаются только в верхней/нижней части массажера

Возможная причина	Решение
Включен массаж для ограниченной области: плечевой пояс или поясница	Выберите режим «Вся спина»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,7 А
  - выход: ≈12 В, 2 А
- Мощность: 24 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - массажера: III
- Размер пульта: 148 × 50 мм
- Длина шнура пульта управления: 0,8 м
- Длина шнура блока питания: 1,8 м
- Размер устройства: 465 × 385 × 690 мм
- Размер упаковки: 690 × 130 × 430 мм
- Вес нетто: 2,6 кг
- Вес брутто: 4,2 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован





Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение массажера, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей в массажер, на пульт управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в область разъема шнура и органы управления.
14. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-2



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87