

**Твой секрет  
красоты!**



**Дарсонваль  
КТ-3114**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство дарсонваля .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок .....	12
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности.....	13

## Общие сведения

Дарсонваль КТ-3114 предназначен для лечебного воздействия высокочастотным импульсным током на разные части тела человека. При дарсонвализации импульсные токи передаются на кожу через герметичные пустотелые стеклянные электроды, которые заполнены газом под низким давлением.

Прибор состоит из пластикового корпуса, в верхней части которого расположено гнездо для электродов. В комплекте к прибору идут 4 электрода: «Листок», «Капля», «Грибок» — для кожи лица и тела, «Расческа» — для волосистой части головы.

В зависимости от положения рабочей части электрода относительно поверхности кожи при дарсонвализации различают два режима воздействия:

- контактная методика или «тихий разряд» — рабочая часть стеклянного электрода хорошо касается кожи;
- дистанционная методика или «искровой разряд» — когда между электродом и поверхностью кожи поддерживается воздушный зазор около 1–3 мм.

Во время дистанционной методики образуется озон и окислы азота, которые способны оказывать бактериостатический и бактерицидный эффекты — это особенно актуально при лечении акне и угревой сыпи.

Основными лечебными эффектами дарсонвализации считаются: местный анальгетический, вазоактивный (повышающий общий тонус органов), местный трофический, противовоспалительный, противозудный и бактерицидный эффект.

Дарсонваль КТ-3114 прост в использовании и предназначен для ухода за кожей лица и тела, а также помогает в борьбе с облысением и другими проблемами волос. С помощью этого прибора в домашних условиях можно обеспечить себе и близким качественный уход за кожей, предотвратить появление целлюлита и развитие других косметических проблем, закрепить результаты, полученные после посещения кабинета косметолога. Проведение процедур дарсонвализации не занимает много времени, не требует специальной подготовки и дорогостоящих компонентов.

Данное устройство не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-либо заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

### История создания аппарата для дарсонвализации

История аппарата Дарсонваля ведет отсчет с конца XIX века (точнее — с 1891 года), когда знаменитый французский физиолог Жак Арсен д'Арсонваль (Jacques Arsène d'Arsonval) провел серию научных экспериментов и установил позитивное влияние высокочастотного напряжения на кожу пациента, положив начало производству прибора, впоследствии названного его именем.

С развитием электроники и технологий, спустя более 120 лет, стало возможным производство аппарата Дарсонваля в миниатюрном корпусе, что позволяет использовать этот многофункциональный прибор как дома, так и в медицинских учреждениях.


Дарсонвализация сегодня — один из самых эффективных методов профилактики и лечения дерматологических, неврологических, сосудистых и других заболеваний, официально признанный косметологами и медиками по всему миру.

## Комплектация

1. Дарсонваль — 1 шт.
2. Газонаполненные электроды:
  - «Грибок» — 1 шт.
  - «Капля» — 1 шт.
  - «Листок» — 1 шт.
  - «Расческа» — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство дарсонваля

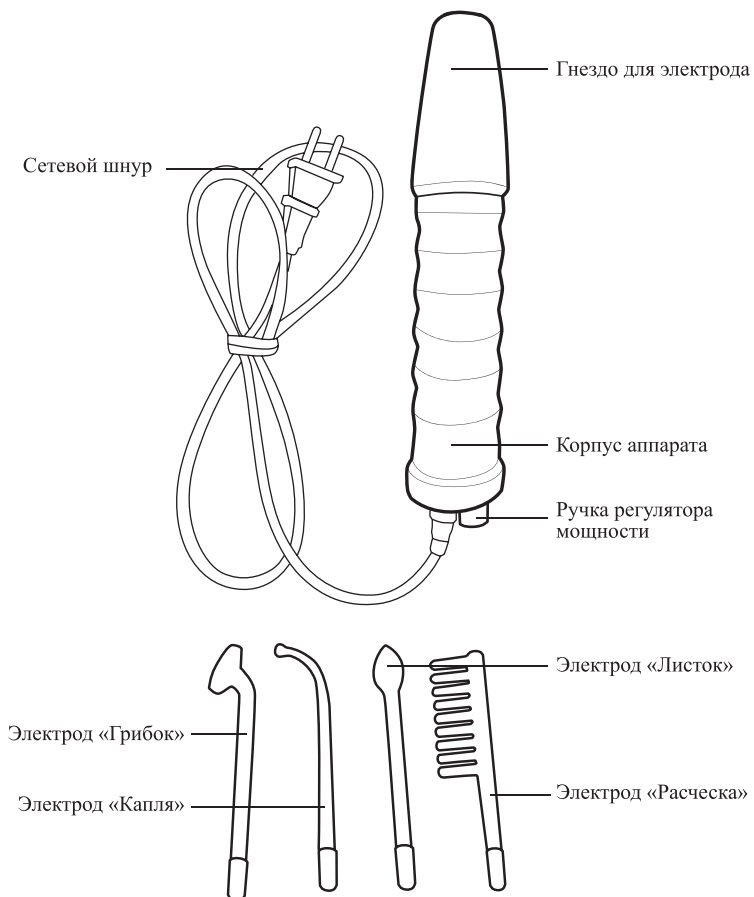



Прибор включается поворотом регулятора мощности по часовой стрелке. Поворот регулятора в крайнее правое положение соответствует максимальной силе тока. Поворот регулятора в крайнее левое положение соответствует минимальной силе тока. Выключается прибор переводом регулятора в положение «On/Off» против часовой стрелки до щелчка.

### **Насадки**

Насадки «Грибок» и «Листок» предназначены для работы с лицом, шеей и зоной декольте. Данные насадки допустимо использовать на других частях тела, насадки универсальны и подойдут для рук, ног, спины.

Насадка «Капля» имеет малый диаметр, поэтому идеальна для точечного воздействия при лечении герпеса, воспалений, избавлении от прыщей.

Насадка «Расческа» применяется для воздействия на кожу головы.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Подготовка к работе**

1. Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой влажной тканью. Тщательно продезинфицируйте электроды: их можно протереть ватным диском, смоченным в спирте или хлоргексидине. Просушите электроды перед использованием.
2. Перед включением аппарата в сеть убедитесь в том, что корпус аппарата, сетевой шнур и электроды не имеют механических повреждений и находятся в чистом состоянии. Треснутым электродом пользоваться нельзя.
3. Температура в помещении должна находиться в пределах от 10 до 35°C, относительная влажность не менее 80%. Категорически запрещается использовать прибор во влажных помещениях: ванных комнатах, банях и т.д.
4. Если прибор транспортировался или хранился при температуре ниже 10°C и относительной влажности более 80%, следует выдержать его не менее 4 часов при комнатной температуре.
5. Если планируется процедура на лице, то перед ее началом необходимо удалить загрязнения и макияж с кожи лица. Нанести на кожу лица детскую присыпку или специальный тальк.
6. Для проведения даскронвализации необходимо соблюдать некоторые условия:
  - Во избежание ожога запрещается наносить на кожу и волосы спиртосодержащие препараты, а также косметические средства, содержащие кислоты.
  - Запрещено применять жидкости и другие вещества, не совместимые с ультрафиолетовым излучением.
  - С тела необходимо убрать все металлические украшения: кольца, серьги, цепи и т.п.
  - Во время процедуры не пользуйтесь мобильными телефонами, электрическими и металлическими приборами.

7. В целях безопасности не разрешается контакт с другими людьми во время проведения процедуры, так как существует опасность поражения электрическим током.

### **Использование**

1. Аккуратно установите необходимый стеклянный электрод в гнездо в верхней части корпуса. Электрод должен легко устанавливаться и выниматься. Вытаскивайте электрод, аккуратно выкручивая его из гнезда. Не прикладывайте силу! Это может привести к повреждению колбы стеклянного электрода или гнезда.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что ручка регулятора мощности установлена в положение «On/Off».
3. Подключите прибор к сети.  
**Внимание!** Во время использования запрещается касаться корпуса прибора, поверхности колбы электрода в непосредственной близости (ближе 25 мм) от гнезда с металлическим держателем.
4. Установите регулятор мощности примерно в среднее положение, поворачивая его по часовой стрелке. Убедитесь, что электрод светится оранжевым цветом, и вновь верните регулятор мощности в крайнее левое положение.
5. Осторожно поднесите электрод к поверхности кожи на ладони. Плавно поворачивайте регулятор по часовой стрелке в сторону максимальной силы тока до возникновения легкого приятного покалывания.
6. Начинайте процедуру на нужном участке тела или лица. Будьте особенно аккуратны при воздействии на чувствительные области лица, избегая область вокруг глаз, и всегда начинайте воздействие при минимальной мощности.
7. По окончании процедуры поверните регулятор мощности в положение «On/Off», и отключите прибор от сети.

**Примечание.** Максимальное время работы прибора должно составлять не более 20 минут, время паузы между процедурами в отключенном состоянии — не менее 10 минут.

**Внимание!** Перед заменой электрода обязательно выключайте из сети.

#### *Процесс ионизации*

Если при включении аппарата электрод не светится и не издает характерного потрескивания при касании с кожей, следует провести процедуру ионизации электрода. Для ионизации электрода подключите прибор к сети, а затем поверните регулятор до упора в крайнее правое положение, соответствующее максимальной силе тока. Приложите электрод к любому заземленному металлическому предмету (чугунная ванна, батарея, кран с водой) и удерживайте прибор, не прикасаясь к металлу, до появления газового разряда в электроде. В среднем, процесс ионизации занимает от 20 секунд до 5 минут. Если по прошествии этого времени электрод не выдает газовый разряд — обратитесь в сервисный центр.

Более подробные инструкции для каждой части тела смотрите ниже.

## Процедуры на область лица и декольте

### *Улучшение питания кожи*

При снижении кожного тургора (упругость и эластичность кожи), для кожи с наличием морщин, пониженным питанием и дряблостью воздействие проводится стеклянным электродом «Грибок» или «Листок» контактно со слабой или средней интенсивностью медленными скользящими движениями, направленными снизу-вверх от подбородка к мочке уха, от носа к вискам, от бровей вверх к волосистой части головы в соответствии с основными массажными линиями, как показано на рисунке ниже.



В области шеи движения проводятся по массажным линиям снизу-вверх, не затрагивая область щитовидной железы, которая находится в средней части шеи.

### *Улучшение состояния проблемной кожи*

Для нормализации деятельности сальных желез и уменьшения пористости кожи воздействие проводится стеклянным электродом «Грибок» контактно со средней или сильной интенсивностью.

При воздействии на акне, угревую сыпь, воспаленные уплотнения используется электрод «Капля». Воздействие оказывается как непосредственно на проблемную точку, так и на область вокруг нее медленными круговыми или спиралевидными движениями. Воздействие на воспаленные уплотнения проводится контактно со средней интенсивностью.

Воздействие на акне и угревую сыпь проводится по методике «искрового разряда» с воздушным зазором 1–3 мм с высокой интенсивностью для оказания «прижигающего» действия.

После окончания процедуры рекомендуется нанести на лицо и шею питательный или увлажняющий крем, подходящий к типу вашей кожи. Можно также провести ручной массаж лица или нанести питательную или успокаивающую маску на 15–20 минут.

Процедуры дарсонвализации проводятся ежедневно или через день. Общая продолжительность одной процедуры составляет 5–10 минут (увеличивать продолжительность следует постепенно). Продолжительность воздействия на область шеи не более 5 минут. Один курс может включать от 10 процедур для улучшения питания кожи до 20 процедур для улучшения состояния проблемной кожи. Курсы можно повторять 3–4 раза в год.



### Процедуры на волосистую часть головы

Процедура проводится для укрепления волосяных луковиц и стимуляции роста волос.

1. Волосы должны быть чистыми и сухими. Из волос необходимо удалить все закладки и хорошо расчесать.
2. Воздействие проводится электродом «Расческа» по контактной методике (без воздушного зазора) со средней интенсивностью. Электрод необходимо плавно и медленно передвигать от лба к затылку, а если волосы короткие, то допускается движение и в обратном направлении.

Вы должны чувствовать легкое покалывание и слышать треск, но неприятных ощущений быть не должно. Если волосы длинные, водите прибором по направлению роста, если короткие — против.


Общее время процедуры составляет 10–15 минут, курс — 20–25 ежедневных сеансов. Чтобы получить видимый эффект, нужно регулярно проводить 3–4 курса в год. При этом волосы начинают быстро расти, улучшается их состояние и внешний вид.

После процедуры можно нанести сыворотку для роста волос или питательную маску на кожу головы.

### Антицеллюлитное воздействие

Процедуру проводят по чистой, сухой коже, без использования кремов и гелей.

Воздействие проводится электродом «Грибок» по контактной методике (без воздушного зазора) на участках с наличием целлюлита.

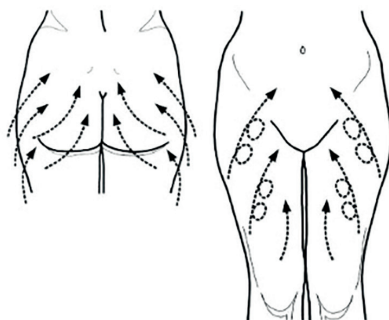

Интенсивность воздействия выбирается от средней до высокой.


После процедуры рекомендуется нанести антицеллюлитный гель или крем.

### **Процедура на руки**

Процедуру проводят по чистой, сухой коже, без использования кремов и гелей.

Процедура проводится электродом «Грибок» по контактной методике (без воздушного зазора) со средней интенсивностью.

Воздействие осуществляется плавными круговыми движениями по спирали от пальцев к области плеча. Типовые схемы даны на рисунке ниже.

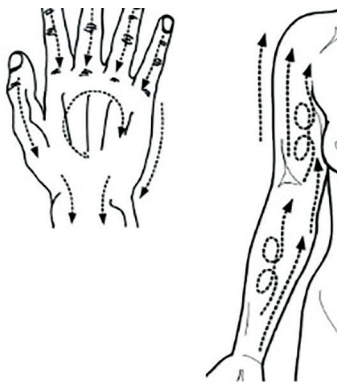

### **Процедура на ноги при варикозном расширении вен**

Процедуру проводят по чистой, сухой коже, без использования кремов и гелей.

Можно нанести на кожу ног детскую присыпку или специальный тальк.

Прибор сначала включают на низкую интенсивность, постепенно ее повышая. Электрод следует двигать по массажным линиям, от края к центру тела. Продолжительность каждой процедуры длится 5–20 минут (в зависимости от обрабатываемого участка). Для достижения ощутимого эффекта процедуру рекомендуется проводить 15–30 раз. Курсы целесообразно повторять, чтобы предотвратить возникновение новых проблем с венами, сосудами, кожей.

### **Воздействие на воротниковую область**

Процедура направлена на снятие напряжения мышц и расслабление.

Эффект достигается благодаря ощущению приятного тепла, возникающего во время процедуры. Воздействие производится электродом «Грибок» контактно с малой интенсивностью. Движения выполняются от области затылка по задней поверхности шеи к плечам. Время воздействия составляет 5–10 минут. Процедуры рекомендуется проводить ежедневно или через день. Курс составляет 10–15 процедур.

### **Меры предосторожности при применении**

**Внимание!** Данное устройство не является медицинским прибором, если у вас есть какие-то заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом

1. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
  - лихорадочное состояние при ОРВИ, гриппе и т.п.
  - детский возраст;
  - психические заболевания;
  - болезни крови, в том числе нарушение свертываемости;
  - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
  - тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе нарушение ритма;
  - тромбофлебит;
  - беременность;
  - активный туберкулез;
  - заболевания опухолевой природы;
  - лихорадка;
  - индивидуальная непереносимость электрического тока;
  - нарушение кожной чувствительности;
  - кожа с веснушками.
2. Противопоказания, связанные с методикой дарсонвализации:
  - гирсутизм (нежелательный избыточный рост волос на лице);
  - выраженные формы купероза (сетка расширенных красных сосудов на лице).

### **Чистка и обслуживание**

Проводите обслуживание прибора только после его отключения от сети. Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Стеклянные электроды необходимо чистить мягкой, слегка влажной тканью. Для очистки электродов допускается применять нейтральное моющее средство или 70% раствор этилового спирта. Перед дальнейшим применением корпус аппарата и электроды необходимо тщательно просушить.

### **Уход и хранение**

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. После очистки аппарата и электродов уберите их в коробку.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

**Если при включении аппарата электрод не светится и не издает характерного потрескивания при касании с кожей**

Возможная причина	Решение
Электрод не выдает газовый разряд	Следует провести процедуру ионизации электрода, которая описана в разделе «Использование» данной инструкции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~110–220 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 13–16 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Длина шнура: 1,6 м
5. Размер электродов: от 14 до 16 см
6. Размер устройства: 52 × 46 × 228 мм
7. Размер упаковки: 295 × 192 × 58 мм
8. Вес нетто: 0,27 кг
9. Вес брутто: 0,75 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшися Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства не считается гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежущей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не включать прибор без электрода.
6. Не давите сильно на электрод при использовании, чтобы не сломать его.
7. Устанавливайте электрод с осторожностью, чтобы не сломать его.
8. С электродами обращайтесь аккуратно, чтобы их не разбить.
9. Храните электроды в оригинальной упаковке или переложенными мягким демпфирующим удары материалом.
10. Если в электроде есть трещина, то таким электродом пользоваться нельзя.

11. Дарсонваль со вставленным электродом надо класть так, чтобы не сломать электрод. Следите за тем, чтобы дарсонваль не мог упасть: он может укатиться, можно случайно задеть за шнур, шнур толстый и весьма жесткий, поэтому в случае свисания со стола может утащить прибор за собой.
12. Электроды и прибор со вставленными электродами не класть в места, где на них могут случайно сесть или встать: на пол, на диван, на стул.
13. Не используйте прибор в ванной комнате, а также если у вас мокрые руки.
14. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
15. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
16. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
17. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
18. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
19. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
20. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
21. Храните устройство в недоступных детям местах.
22. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87