


Искусство очистления кожи!

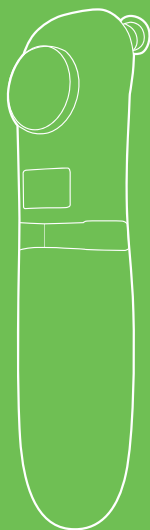

**Вакуумный
очиститель кожи
КТ-3126**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство вакуумного очистителя кожи	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики.....	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Вакуумный очиститель кожи КТ-3126 поможет очистить кожу от черных точек, сальных пробок и других загрязнений в порах. Вакуумная чистка кожи стимулирует кровообращение и регенерацию кожи, что улучшает цвет лица и убирает неглубокие морщины.

Магнитным фиксатором на устройстве можно закрепить ватный диск, пропитанный ухаживающим косметическим средством. После чего включить вибрацию, чтобы добиться лучшего проникания косметического средства в кожу.

Перед проведением вакуумной чистки необходимо раскрыть поры для максимальной эффективности процедуры. Для этого в устройстве предусмотрен нагрев. Чтобы после процедуры закрыть поры и успокоить кожу, воспользуйтесь охлаждением. Для лучшего эффекта включите вибрацию вместе с нагревом или охлаждением.



Вакуумный очиститель кожи имеет 4 уровня силы всасывания для очищения разного типа кожи (сухой, нормальной, комбинированной и жирной) и 4 вида насадок. Большая круглая насадка нужна для удаления загрязнений из пор крупных участков кожи, например, Т-зоны. Малая круглая насадка подходит для глубокого очищения и удаления загрязнений на труднодоступных участках кожи. Использование микрокристаллической насадки способствует отшелушиванию поверхностного слоя кожи, который состоит из омертвевших клеток, а также полировке кожи. Для проведения вакуумной очистки чувствительных участков кожи, таких как уголки губ, предназначена овальная насадка.

Вакуумный очиститель кожи работает от аккумулятора и имеет небольшие габариты, поэтому его удобно брать с собой в путешествие. Благодаря индикатору заряда на дисплее вы всегда будете знать, когда необходимо зарядить устройство. Также на дисплее отображаются индикаторы режимов и уровень силы всасывания.

Комплектация

1. Вакуумный очиститель кожи с двумя уплотнительными кольцами — 1 шт.
 - переходник с фильтром и уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - фиксатор — 1 шт.
2. Фильтр — 5 шт.
3. Большая круглая насадка — 1 шт.
4. Микрокристаллическая насадка — 1 шт.
5. Малая круглая насадка — 1 шт.
6. Овальная насадка — 1 шт.
7. Шнур Micro-USB — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство вакуумного очистителя кожи

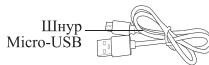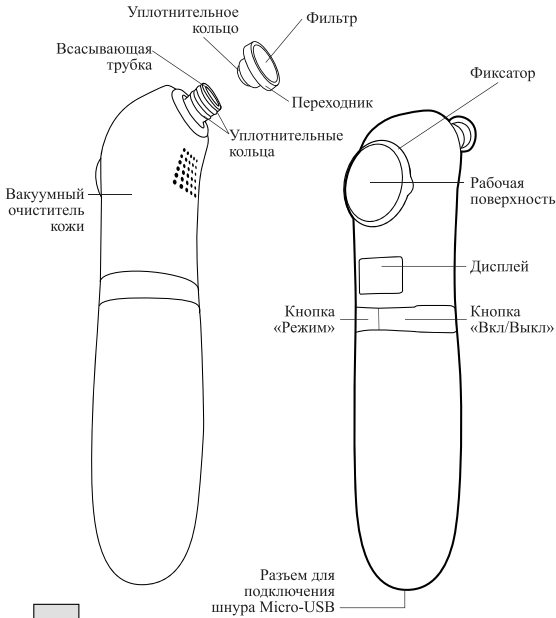

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает устройство, а также включает режим вакуумной чистки и регулирует силу всасывания. Вакуумный очиститель кожи имеет 4 уровня силы всасывания: уровень 1 — для сухой и чувствительной кожи, а также при проведении чистки чувствительных участков кожи с использованием овальной насадки, уровень 2 — для нормальной кожи, уровень 3 — для комбинированной кожи, уровень 4 — для жирной кожи. Чем больше уровень, тем сильнее сила всасывания. Уровню силы всасывания соответствует количество делений на дисплее устройства.

Нажатие на кнопку «Режим» циклически переключает режимы: нагрев, нагрев с вибрацией, охлаждение, охлаждение с вибрацией, вибрация.

Большая круглая насадка нужна для удаления загрязнений на любом участке лица, кроме области вокруг глаз.

Микрористаллическая насадка используется для отшелушивания кожи на любом участке лица, кроме области вокруг глаз. Во время проведения вакуумной чистки кожи с применением микрористаллической насадки происходит процедура микродермабразии — удаляется поверхностный слой кожи, состоящий из омертвевших клеток, а также происходит полировка кожи.


Малая круглая насадка подходит для глубокого очищения. Также ее можно использовать для удаления загрязнений на труднодоступных участках кожи, таких как крылья носа.

Овальная насадка предназначена для проведения вакуумной чистки чувствительных участков кожи, таких как уголки губ.

Сменные фильтры наклеиваются на переходник для предотвращения попадания грязи и омертвевших частиц кожи в устройство.

С помощью магнитного **фиксатора** на рабочей поверхности можно закрепить ватный диск или нетканую салфетку.

Дисплей

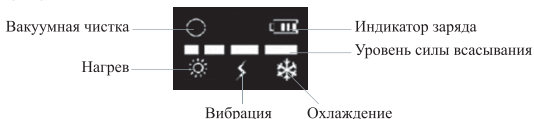

Вакуумный очиститель кожи обладает **дисплеем**, на котором отображаются индикаторы режимов и заряда батареи, а также уровень силы всасывания.

Деления **индикатора заряда** показывают степень заряженности аккумулятора устройства: одно деление примерно равно 25% заряда батареи.

При включении нагрева рабочая поверхность нагревается до 45 °С. Нагрев помогает раскрыть поры и подготовить кожу к проведению процедуры вакуумной чистки.

При включении охлаждения рабочая поверхность охлаждается до 17 °С. Охлаждение кожи после проведения чистки лица закрывает поры и успокаивает кожу.

Вибрация рабочей поверхности способствует лучшему проникновению косметических средств в кожу.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.

Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно продезинфицируйте и просушите насадки и рабочую поверхность: протрите их ватным диском, смоченным в хлоргексидине или 70% растворе спирта. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Если у индикатора заряда нет ни одного деления, устройство необходимо зарядить. Положите устройство на устойчивую сухую ровную горизонтальную поверхность, подключите шнур Micro-USB к разъему устройства, а затем к разъему источника питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, не менее 0,5 А. Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк. Во время зарядки деления индикатора заряда загораются поочередно. Когда устройство полностью заряжено, четыре деления заряда батареи горят непрерывно. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Время полной зарядки составляет около 2 часов. Заряжайте прибор не более 2 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить вакуумный очиститель кожи наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство до двух делений индикатора заряда в течение 1 часа. При длительном хранении устройства заряжайте аккумулятор до двух делений индикатора заряда раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С. Если устройство перевозиться или доставляться до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Использование

Очищение кожи перед проведением процедуры

1. Перед началом процедуры удалите макияж.
2. Убедитесь, что рабочая поверхность чистая.
3. Нанесите на ватный диск очищающий тоник для лица. Положите ватный диск на рабочую поверхность и закрепите его фиксатором.

Примечание. Если ватный диск слишком толстый и фиксатор не может удержать его на устройстве, разделите ватный диск на две части.

4. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 5 секунд. Загорится дисплей. Устройство начнет работать в режиме вакуумной чистки.



5. Нажмите на кнопку «Режим» пять раз, чтобы включить вибрацию.
6. Прижмите ватный диск с очищающим средством к коже и плавно перемещайте по лицу.
7. Через 4 минуты сработает автоотключение. Если вы хотите выключить устройство раньше, то нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Дисплей погаснет.

Раскрытие пор

1. Убедитесь, что рабочая поверхность чистая.
2. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 5 секунд. Загорится дисплей. Устройство начнет работать в режиме вакуумной чистки.
3. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы включить нагрев. Нажмите на кнопку «Режим» второй раз, если хотите включить нагрев с вибрацией.
4. Прижмите рабочую поверхность к коже и плавно перемещайте, чтобы прогреть всю кожу лица и раскрыть поры.
5. Через 4 минуты сработает автоотключение. Если вы хотите выключить устройство раньше, то нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Дисплей погаснет.

Проведение вакуумной чистки лица

1. Убедитесь, что насадки и фильтр чистые.
2. Установите одну из насадок: наденьте насадку на всасывающую трубку до упора.
3. Для включения вакуумного очистителя кожи нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Загорится дисплей. Устройство начнет работать в режиме вакуумной чистки.
4. Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл» для изменения силы всасывания. По умолчанию выбрана третья сила всасывания.
5. Проведите чистку лица, продвигая устройство по коже медленными круговыми движениями в одном направлении.

Внимание! Не задерживайтесь на одном участке кожи более чем на 3 секунды и не давите на насадку.

6. Через 4 минуты сработает автоотключение. Если вы хотите выключить устройство раньше, то нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Дисплей погаснет.
7. Для легкого отделения насадки от кожи отклоните насадку в сторону, чтобы запустить воздух. Это поможет предотвратить появления синяков и повреждений на вашей коже.

Внимание! Никогда не убирайте насадку от кожи, предварительно не запустив воздух в насадку.

Уход за кожей после проведения вакуумной чистки лица

1. Убедитесь, что рабочая поверхность чистая.
2. Нанесите на ватный диск успокаивающий тоник для лица. Положите ватный диск на рабочую поверхность и закрепите его фиксатором.

Примечание. Если ватный диск слишком толстый и фиксатор не может удерживать его на устройстве, разделите ватный диск на две части.

3. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 5 секунд. Загорится дисплей. Устройство начнет работать в режиме вакуумной чистки.
4. Нажмите на кнопку «Режим» три раза, чтобы включить охлаждение или четыре раза, чтобы включить охлаждение с вибрацией.
5. Прижмите ватный диск с успокаивающим средством к коже и плавно перемещайте по лицу. Это охладит кожу и поможет закрыть поры после проведения процедуры чистки.
6. Через 4 минуты сработает автоотключение. Если вы хотите выключить устройство раньше, то нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Дисплей погаснет.
7. Нанесите на кожу увлажняющий крем для лица.

Примечание. После выключения вакуумного очистителя кожи вентилятор в устройстве продолжит работать еще 2–3 минуты. Это нормально. Таким образом происходит охлаждение внутренних частей устройства, что помогает увеличить срок службы очистителя кожи.

Советы

Держите устройство только сухими руками во избежание попадания влаги на кнопки, в корпус устройства и разъем шнура Micro-USB. Вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя.

Для эффективного проведения процедуры вакуумной чистки кожа должна быть хорошо распарена. Если вашей коже для раскрытия пор недостаточно нагрева, то распарьте кожу любым удобным вам способом. Вы можете распарить кожу, используя горячее полотенце. Для этого намочите его в горячей воде, отожмите и накройте им лицо на 5 минут.

При первом использовании проводите процедуру чистки кожи при самой низкой силе всасывания.

Во время использования не задерживайтесь на одном участке кожи более чем на 3 секунды и не давите на насадку. Продвигайте устройство по коже медленными круговыми движениями в одном направлении.

Перед тем как убрать насадку от кожи, запустите в нее воздух, отклонив насадку в сторону. Это защитит вашу кожу от повреждений.

Не используйте скраб или другое отшелушивающее средство перед проведением вакуумной чистки лица.

Проводите вакуумную чистку лица 1–2 раза в неделю в зависимости от вашего типа кожи. Не проводите вакуумную чистку лица повторно в течение одного дня.

Проводите вакуумную чистку кожи только на лице, избегая области вокруг глаз.

Противопоказания к применению:

- онкологические заболевания кожи;
- нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
- герпес, розацеа, экзема;
- воспаления на коже (акне);
- нарушения свертываемости крови;
- нарушения кожной чувствительности;



- наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- эпилепсия;
- тромбофлебит;
- беременность;
- выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
- тонкость кожных покровов с близким расположением сосудов.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления, в область разъема шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB.

Очищайте насадки и рабочую поверхность перед и после каждого использования — протирайте ватным диском, смоченным в хлоргексидине или 70% растворе спирта. Не используйте для чистки насадок жесткие моющие средства и абразивные ткани.

По мере загрязнения фильтра меняйте его. Для этого снимите насадку с вакуумного очистителя кожи, отклейте фильтр от переходника фильтра, выбросьте старый фильтр и приклейте на переходник новый фильтр из комплекта.

Уход и хранение

Перед хранением тщательно очистите устройство и насадки, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните вакуумный очиститель кожи в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить вакуумный очиститель кожи наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство до двух делений в течение 1 часа. При длительном хранении устройства зарядите аккумулятор до двух делений индикатора заряда раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Вакуумный очиститель кожи не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство в течение 2 часов

Вакуумный очиститель кожи не заряжается, индикатор заряда не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточное напряжение источника питания	Подключите устройство к другому источнику питания
Поврежден шнур Micro-USB	Обратитесь к производителю за новым шнуром Micro-USB или приобретите такой же шнур
Компьютер или пауэрбанк выключен/разряжен	Включите/зарядите компьютер или пауэрбанк
Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания	Проверьте соединение шнура Micro-USB с разъемом на устройстве и источнике питания

Вакуумный очиститель кожи перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 4 минут использования сработало автоотключение устройства	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство

Зона нагрева/охлаждения недостаточно нагревается/охлаждается

Возможная причина	Решение
Температура воздуха окружающей среды не подходит для нормальной работы термозлемента	Это является особенностью работы прибора и не является неисправностью. Для нагрева и охлаждения в устройстве используется элемент Пельтье, для которого разность температур составляет около 10–12 °С относительно температуры окружающей среды. Для корректной работы устройства температура окружающей среды не должна быть выше 29 °С. Если температура будет выше, то термозлемент не сможет охладить зону нагрева/охлаждения до необходимой температуры. Например, если включить охлаждение при температуре окружающей среды 35 °С, то температура охлаждения не сможет опуститься ниже 23–25 °С



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB \approx 5 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1 А*ч (3,7 Вт*ч)
3. Мощность: 5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Температура охлаждения: 17 ± 3 °С
6. Температура нагрева: 45 ± 3 °С
7. Автоотключение: через 4 мин
8. Максимальное разрежение: 59 кПа
9. Уровень шума: 60 дБ
10. Время зарядки: 2 ч
11. Время работы от аккумулятора: 2–3 ч
12. Длина шнура Micro-USB: 0,4 м
13. Размер устройства: 41 × 35 × 180 мм
14. Размер упаковки: 138 × 210 × 58 мм
15. Вес нетто: 0,20 кг
16. Вес брутто: 0,41 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область органов управления, в область разъема шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте вакуумный очиститель кожи только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением вакуумного очистителя кожи к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Запрещается пользоваться вакуумным очистителем кожи при следующих показаниях:
 - онкологические заболевания кожи;
 - нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
 - герпес, розацеа, экзема;
 - воспаления на коже (акне);
 - нарушения свертываемости крови;
 - нарушения кожной чувствительности;
 - наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекетки);
 - эпилепсия;
 - тромбофлебит;
 - беременность;
 - выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
 - тонкость кожных покровов с близким расположением сосудов.
2. Проводите вакуумную чистку кожи только на лице, избегая области вокруг глаз.



5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении устройства от источника питания.
7. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться вакуумным очистителем кожи только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Кладите вакуумный очиститель кожи только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения вакуумного очистителя кожи и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
18. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг вакуумного очистителя кожи.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-2





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87